

エアGシリーズ

逐次型空気圧方式マッサージ器

快適なマッサージを実現、血液のうっ滞や浮腫を軽減

エアG パワーQ1000 プラス/プレミアム



管理医療機器

特定保守管理医療機器

医家向け

EMC適合

Power-Q1000 プラス



Power-Q1000 プレミアム



適用禁止対象(患者)
既に深部静脈血栓症や肺血栓そく(塞)栓症を併発している患者、うっ血性心不全による肺浮腫(臓)をもつ患者などには絶対に使用しないで下さい。
[症状がより重篤になる恐れがあります。]

製造販売業者



21世紀の医療をサポートする

株式会社グループ二十一

〒812-0013福岡市博多区博多駅東3丁目11-15文喜ビル4F
TEL092-437-3366 <http://www.group-21.com>

医療機器製造販売業許可番号:40B1X10007
医療機器製造業許可番号:40BZ200057

販売店

お問い合わせ・ご注文はこちら

エア G パワー-Q1000 プラス

簡単操作の標準タイプ


標準セット

本体・両脚スリーブ・足裏圧迫パッド・脚用ホース


4つのチャンバを逐次的に膨張・収縮させ、つま先からふくらはぎ、ふとももへ移動することで筋肉活動を模倣し静脈の血行を促進します。
タイマ設定(5~30分)と連続運転の選択もできます。



エア G パワー-Q1000 プラス マッサージモード

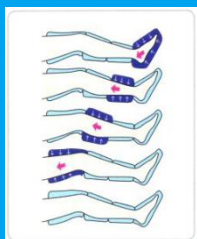

エア G パワー-Q1000 プレミアム マッサージモード

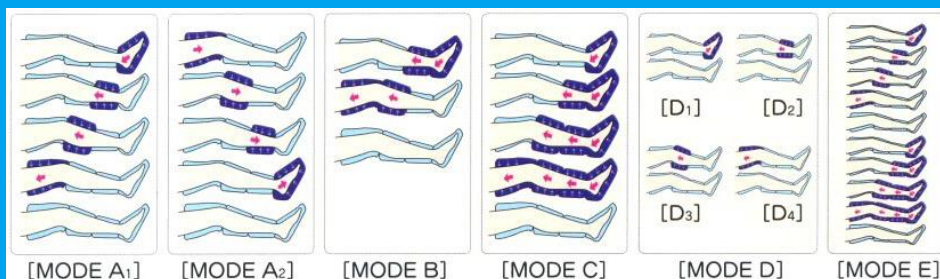

エア G パワー-Q1000 プレミアム

マッサージモードが選べるプレミアムタイプ

標準セット

本体・両脚スリーブ・足裏圧迫パッド・脚用ホース

9タイプのマッサージモードが選択できます。

タイマ設定(5~99分)・連続運転・加圧時間・加圧間隔時間の設定も可能です。



製品名	エア G パワー-Q1000 プラス	エア G パワー-Q1000 プレミアム		エア G パワー-Q1000 プラス	エア G パワー-Q1000 プレミアム
型式	Power-Q1000 Plus	Power-Q1000 Premium	寸法・重量	W260xH200xD125mm [Plus 2.0kg][Premium 3.3kg]	
JAN コード	4571434390013	4571434390020	電源・電圧	AC100V 50/60Hz	
圧力調整範囲	40 ~ 200 mmHg		EMC	JIS T0601-1-1-2:2012	
タイマ設定時間	5~30 分、連続	5~99 分、連続	安全性適合規格	JIS T0601-1:1999 JIS T 0601-2-204:2005	
加圧時間	6 秒	5,7,9,11,13,15,17,19,21 秒	医療機器認証番号	225AKBZX00029000	225AKBZX00028000
加圧間隔時間	1 秒	0.5,10,15,20,25,30 秒	クラス分類	クラス II (管理医療機器)・特定保守管理医療機器	
マッサージ部位	腕、脚、足底部		診療報酬	B001-6 肺血栓栓塞症予防管理料(入院中 1 回)	
マッサージモード	図参照			305 点	

エア G パワー-Q1000 シリーズ 消耗品

単品でご注文できます

